


# Lernspiele für MetaTalk

[www.metacom-symbole.de](http://www.metacom-symbole.de) > Downloads  
> Vokabular zu MetaTalk









Die Lernspiel-Vokabulare 6x11/5x9/4x7/3x5 enthalten Spiele verschiedener Schwierigkeitsgrade und Themen, angefangen von einfachen Tippspielen bis hin zum ersten Schreiben. Auch Klavierspielseiten sind dabei (nur 6x11 und 5x9).




Der QR-Code führt zu einem Video.

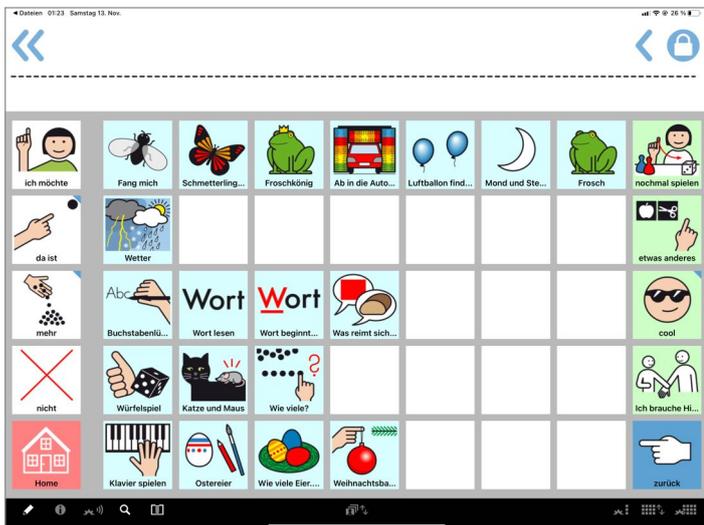

oben: Startseite Lernspiele\_5x9; unten: Lernspiel-Beispiele

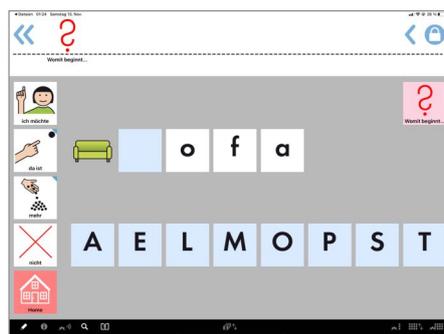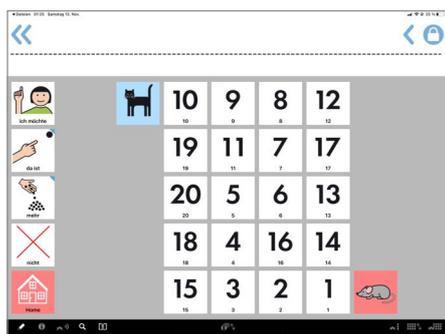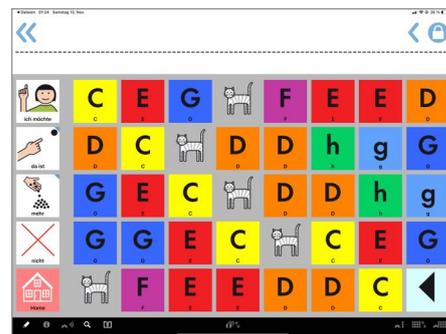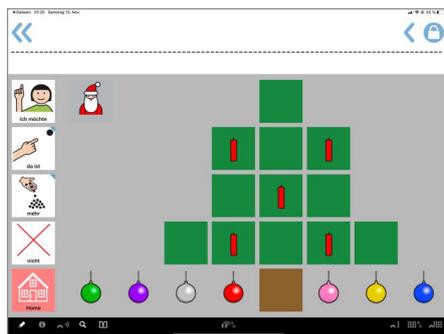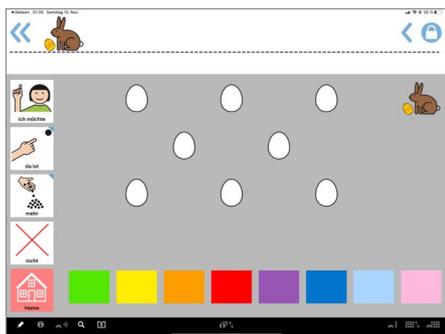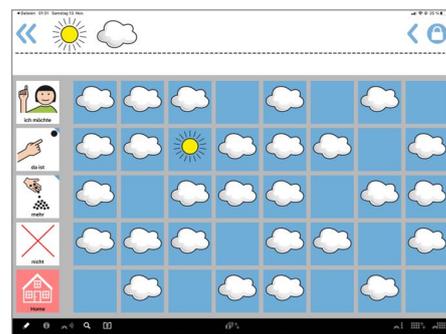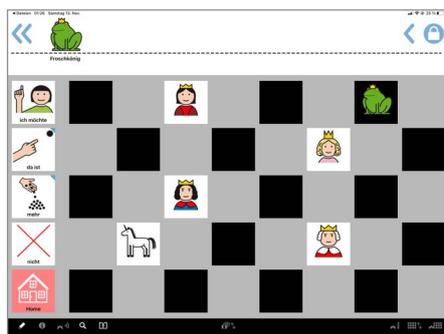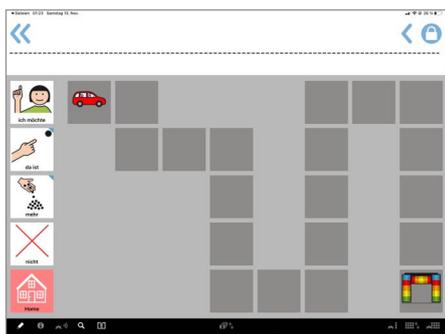


Die Auswahl der Spiele kann auf der Startseite durch Ausblenden von Tasten eingeschränkt werden. Dazu über die Bleistifttaste den Editiermodus freischalten, die auszublendende Taste doppelt antippen und „Tasteninhalte sichtbar“ ausschalten.

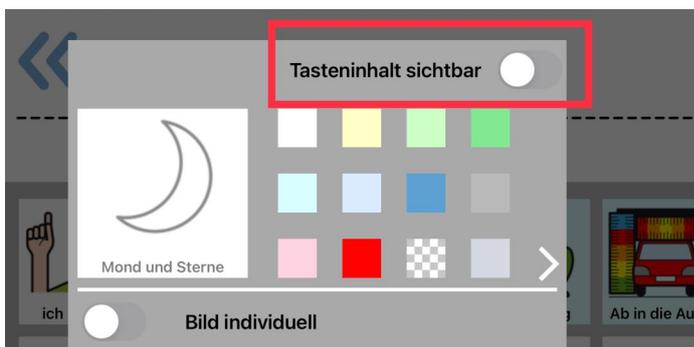

## Wie lassen sich die Lernspiele in MetaTalk einbinden?


Nachdem das Lernspielvokabular heruntergeladen und in den MetaTalk Vokabular-Manager importiert wurde, öffnet man es. Die Taste auf der Startseite unten rechts ist für die Verlinkung in das Vokabular gedacht, mit dem kommuniziert wird – in diesem Beispiel ist es „MetaTalkDE.5x9“.

Per Doppeltipp auf die Taste öffnet sich der Tasten-Editor. Hier wird die Tastenfunktion *gehe zu Vokabular* und dann das Zielvokabular „MetaTalkDE.5x9“ eingestellt. Jetzt kann der Tasten-Editor geschlossen werden.

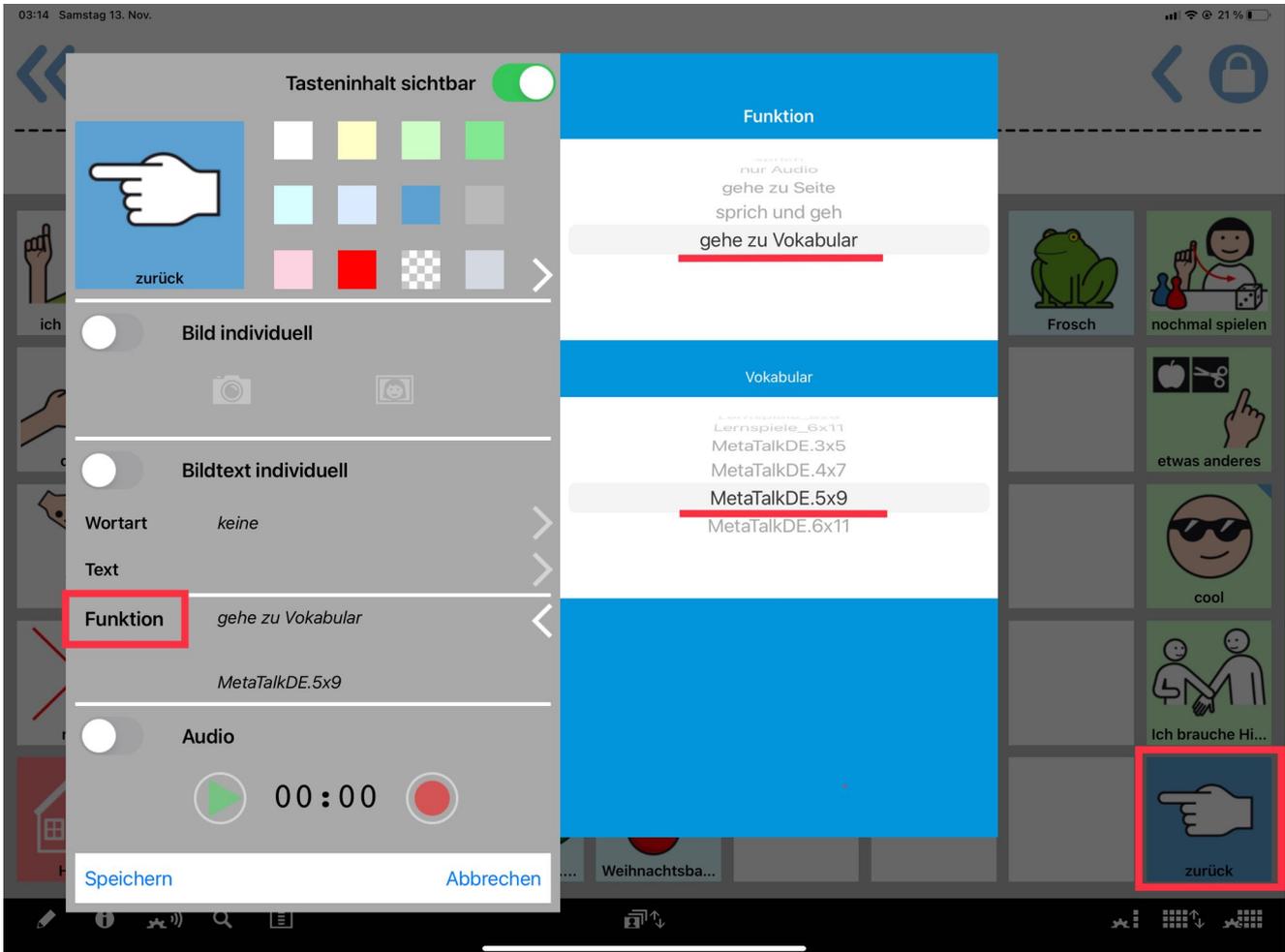


Nachdem das Lernspielvokabular heruntergeladen und in den MetaTalk Vokabular-Manager importiert wurde, öffnet man es. Die Taste auf der Startseite unten rechts ist für die Verlinkung in das Vokabular gedacht, mit dem kommuniziert wird – in diesem Beispiel ist es „MetaTalkDE.5x9“.

Per Doppeltipp auf die Taste öffnet sich der Tasten-Editor. Hier wird die Tastenfunktion *gehe zu Vokabular* und dann das Zielvokabular „MetaTalkDE.5x9“ eingestellt. Anschließend kann der Tasten-Editor geschlossen und durch Antippen der neuem Linktaste ins Vokabular „MetaTalkDE.5x9“ gewechselt werden.

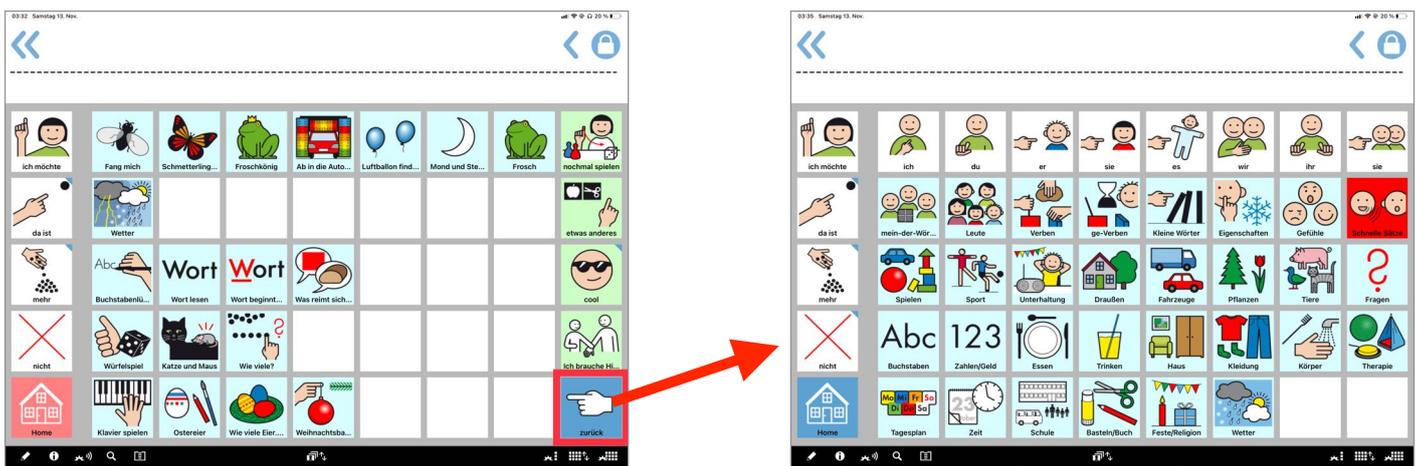



Nun muss auch im Vokabular „MetaTalkDE.5x9“ noch eine Linktaste angelegt werden, über die man zum Lernspiele-Vokabular wechseln kann.

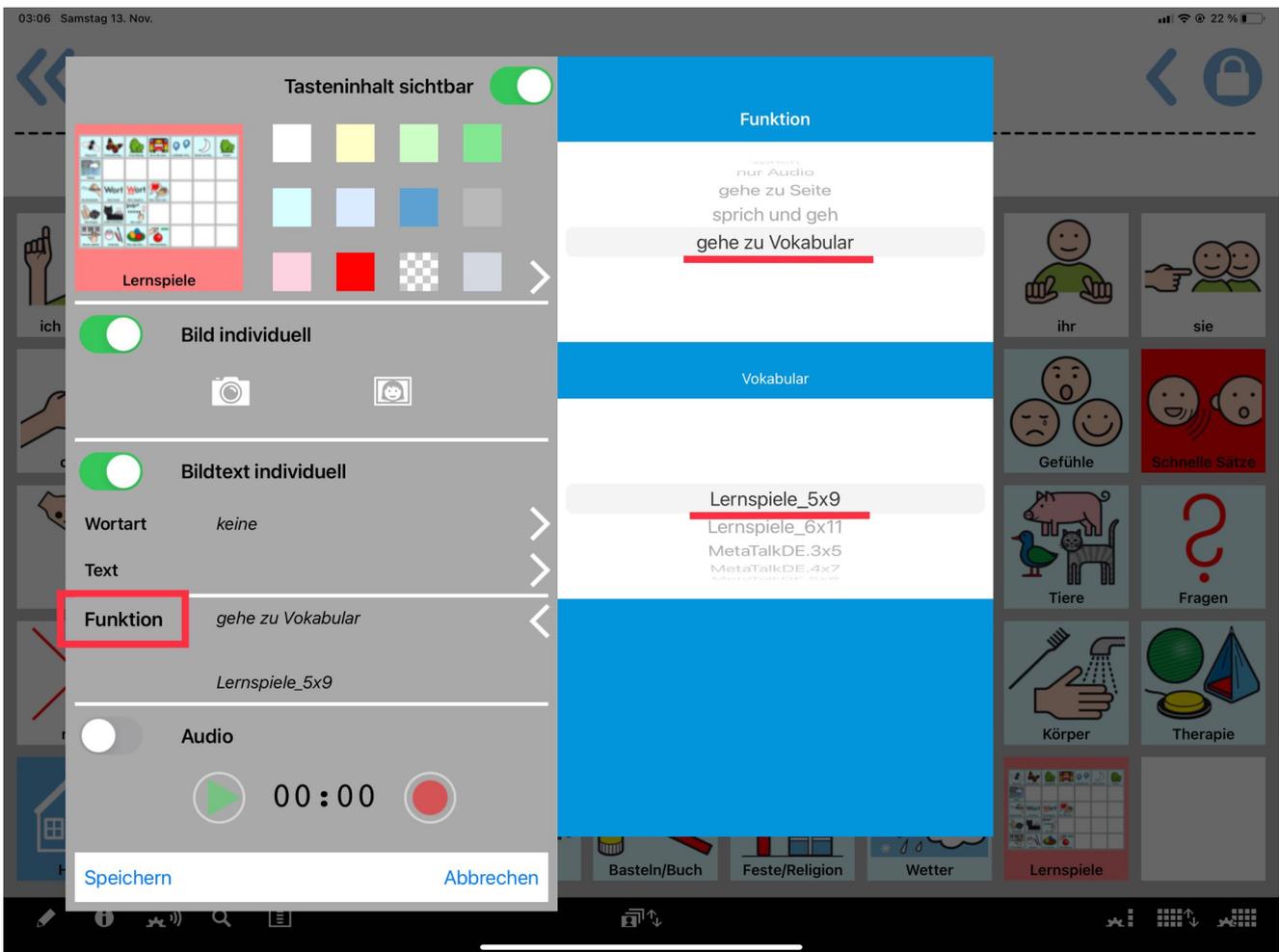

Damit erkennbar ist, dass es sich um zwei verschiedene Vokabulare handelt, zwischen denen man hin und her wechselt, wurde die Home-Taste im Lernspiele-Vokabular hellrot eingefärbt, die im Vokabular „MetaTalkDE.5x9“ unverändert blau belassen.

